



Navecillas de Pesaje

Navecillas de poliestireno flexible ofrecen superficies lisas para proporcionar precisión al verter con mínima pérdida de muestra.

- Ideal para aplicaciones de pesaje, dispensación, o almacenamiento
- Seleccione blanco, negro, o azul para mejor contraste de color asegurando que la muestra se retire completamente
- Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos y débiles, soluciones acuosas, alcoholes, y bases
- Rango de temperatura -10 a 70°C (14 a 158°F)
- Versiones antiestáticas disponibles haciendo las navecillas no reactivas con la mayoría de las sustancias y adecuados para el pesaje de muestras afectadas por estática
- Base ancha y plana asegura estabilidad y previene vuelcos
- Esquinas redondeadas permiten flexión simple para el controlado de verter de muestras líquidas, pulverizadas o granulares
- Bases planas y lados inclinados permiten un fácil apilamiento para un almacenaje conveniente
- Puede usarse con analizadores de humedad de microondas
- Fabricados de material conforme a FDA/Categoría-Alimenticia
- Desechable




Navecillas de Pesaje Estándar



Navecillas de Pesaje Cuadradas



Navecillas de Pesaje Hexagonales

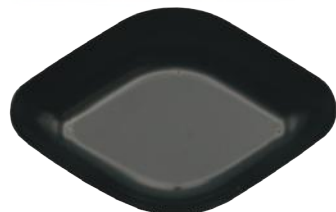

Navecillas de Pesaje en Forma Diamante




Platos de Pesaje-Verter



Navecilla de Pesaje Estéril Estándar

Ideal para aplicaciones donde hay preocupación de contaminación cruzada y la 'limpieza' es una necesidad en investigaciones de ciencias de la vida, alimento, biofarmacéutico, medio ambiente y ambientes de investigación molecular.

- Esterilización de haz electrones
- Trazabilidad de número de lote para control de calidad
- Certificado de esterilidad disponible a petición

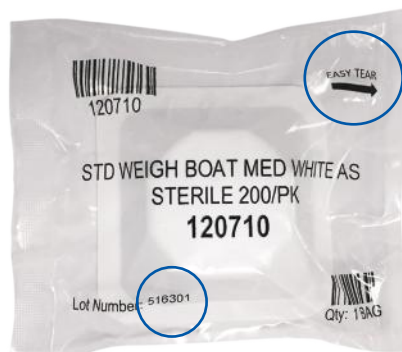

El paquete fácil de romper facilita manejo rápido y eficiente

Número de lote indicado en versiones estériles



Forma	No. de Parte de Material Estándar	No. de Parte de Material Antiestático	Color	Medida	Volumen mL	L x A x A pulg.	cm	MdU
Estándar	HS1420A	HS1420AA	Blanco ☐	Pequeño	10	1.8 x 1.8 x .3	4.6 x 4.6 x .8	500 cu/pqt., 40 pqt./caja
	HS1421A	HS120222	Azul ☒					
	HS1423A	HS1423AA	Negro ☒					
	HS1420B	HS1420BB	Blanco ☐					
	HS1421B	HS120223	Azul ☒	Mediano	85	3.4 x 3.4 x .9	8.5 x 8.5 x 2.4	500 cu/pqt., 20 pqt./caja
	HS1423B	HS1423BB	Negro ☒					
	HS1420C	HS1420CC	Blanco ☐	Grande	280	5.5 x 5.5 x .9	14 x 14 x 2.2	500 cu/pqt., 8 pqt./caja
	HS1421C	HS120224	Azul ☒					
	HS1423C	HS1423CC	Negro ☒					
Hexagonal	—	HS14251A	Blanco ☐	Pequeño	6	1.5 x 1 x .4	3.8 x 2.5 x .9	500 cu/pqt., 40 pqt./caja
	—	HS14251B		Mediano	46	2.5 x 2 x .7	6.4 x 5.1 x 1.9	500 cu/pqt., 20 pqt./caja
	—	HS14251C		Grande	194	4 x 3 x .9	10.2 x 7.6 x 2.2	500 cu/pqt., 8 pqt./caja
	—	HS14251D		X-Grande	364	5 x 3.5 x 1.2	12.7 x 8.9 x 3.1	500 cu/pqt., 8 pqt./caja
Pesaje-Verter	HS1419A	HS120225	Blanco ☐	Pequeño	14	1.7 x 2.3 x .5	4.3 x 5.8 x 1.3	500 cu/pqt., 32 pqt./caja
	HS1419B	HS120226		Mediano	137	3.3 x 5.2 x 1	8.3 x 13.2 x 2.6	500 cu/pqt., 20 pqt./caja
	HS1419C	HS120227		Grande	259	4.3 x 7.2 x 1	10.8 x 18.3 x 2.6	500 cu/pqt., 8 pqt./caja
Cuadrado	HS1422	—	Blanco ☐	Mediano	51	3.5 x 3.5 x .3	9 x 9 x .7	500 cu/pqt., 8 pqt./caja
Diamante	HS1424AA	HS1425AA	Blanco ☐	Pequeño	5	2.1 x 1.3 x .2	5.3 x 3.3 x .6	500 cu/pqt., 40 pqt./caja
	HS1427AA	HS1426AA	Negro ☒					
	HS1424A	HS1425A	Blanco ☐	Mediano	25	2.6 x 1.9 x .6	6.7 x 4.7 x 1.4	500 cu/pqt., 40 pqt./caja
	HS1427A	HS1426A	Negro ☒					
	HS1424B	HS1425B	Blanco ☐	Grande	30	3.1 x 2.2 x .6	7.8 x 5.6 x 1.4	500 cu/pqt., 20 pqt./caja
	HS1427B	HS1426B	Negro ☒					
	HS1424C	HS1425C	Blanco ☐	X-Grande	100	4.7 x 3.5 x .7	11.9 x 9 x 1.9	500 cu/pqt., 8 pqt./caja
	HS1427C	HS1426C	Negro ☒					
Estéril Estándar	—	120710	Blanco ☐	Mediano	85	3.4 x 3.4 x .9	8.5 x 8.5 x 2.4	5 cu/bolsa, 40 bolsas/pqt, 8 pqt./caja

Cucharones Doble Propósito


Los cucharones de doble propósito de Heathrow Scientific ofrece una solución económica única cual combina la función de un cucharón y navecilla de pesaje, y un embudo en un solo producto.

El proceso de pesaje se ha racionalizado, ahora simplemente tome la muestra o retire el material en el cucharón y colóquelo directamente sobre la balanza. Eliminando la necesidad de navecillas de pesaje o papel de pesaje más ahorra espacio valioso en el laboratorio.

- Fabricado de poliestireno antiestático que es impermeable y reduce la posibilidad de que materiales se peguen al cucharón
- Se embarcan y almacenan planos y cuando listos para utilizar, son fácil de montar insertando la lengüeta de fijación en el agujero
- La característica de la lengüeta de fijación permite la forma de cucharón ayudando a retener materiales
- Recubierto para soportar polvos, geles y semisólidos
- El diseño angosto sobre la extremidad mantiene el cucharón estable mientras en la balanza y permite que materiales fácilmente se obtengan y dispensen
- Certificado de esterilidad disponible a petición para los cucharones estériles
 - Esterilización de haz electrones reduce el riesgo de contaminación cruzada y muestras comprometidas
 - Los requisitos de dosificación para la esterilización de haz de electrones que resultan en productos esterilizados se determinan por procedimientos que cumplen con la norma ISO 11137-3:2017
- Desechable



No. Pieza	Color	Medida	L x A pulg.	cm	Estéril	MdU
120656	Blanco	☐	Grande	5 x 3.5	✓	100 cu/pqt., 50 pqt./caja
120679	Negro	☒				10 cu/bolsa, 10 bags/pk, 25 pqt./caja
120657	Blanco	☐	Pequeño	5 x 2.5	✓	100 cu/pqt., 50 pqt./caja
120680	Negro	☒				10 cu/bolsa, 10 bags/pk, 25 pqt./caja

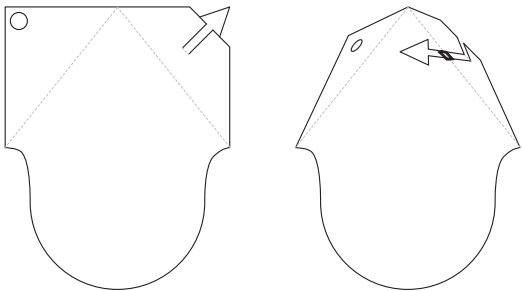

Ensamble fácilmente girando la flecha lengüeta a través del agujero.



- Cucharon Estéril**
- Esterilizado de haz electrones
 - Trazabilidad de número de lote para control de calidad

Navecillas y Platos de Pesaje

Platos de pesaje propósito-general, dispensación, almacenamiento, procesamiento de alimentos, evaporación, o secado.

- Platillos también hacen buenos cubiertas de polvo para los recipientes abiertos
- Desechables

Navecillas de Pesaje de Aluminio

- Navecillas robustas y a la vez ligeras cuentan con una base lisa y plana para la manipulación de muestras y una pared ensanchada y prensada para la rigidez
- La manija de pestaña se puede grabar para identificación antes de pesar



Navecillas de
Pesaje de Aluminio



Plato de Pesaje de Aluminio

Platillos de Pesaje de Aluminio


- Diseñado para balanzas que determinan humedad y con paredes levemente afiladas para apilar



No. Pieza	Medida	Dia. x A pulg.	mm	MdU
HS14521A	Pequeño	1.7 x 0.5	43 x 12	100 cu/pqt., 36 pqt./caja
HS14521B	Mediano	2.2 x 0.6	57 x 14	
HS14521C	Grande	2.8 x 0.6	70 x 16	
HS14522	Grande	0.4 x 0.3	10 x 8	50 cu/pqt., 20 pqt./caja

smartPans™

- Ideal para microbalanzas, micro orgánico elemental y análisis térmico, y uso farmacéutico
- Fabricado de lámina de ultra vacío alto (UVH) – “A” mojable y completamente libre de aceites normalmente encontrados en otros grados de papel aluminio
- La lamina cumple con ASTM B-479, especificaciones 3.1.4 y 10.3.1
- Los sartenes de accesorio “Estilo Cahn” son compatibles con la mayoría de los analizadores y microbalanzas disponibles comercialmente

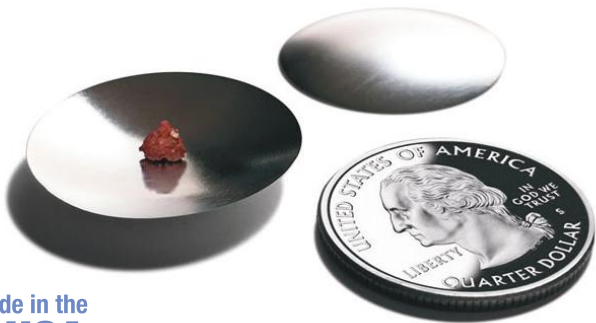

Made in the
★USA

No. Pieza	Dia. x A pulg.	mm	MdU
120627	1 x 0.1	25 x 3.6	20 cu/pqt., 5 pqt./caja

Papeles de Pesaje

Libre de nitrógeno para una superficie muy liza y una buena recuperación de muestras. Lo suficientemente fuerte como para soportar material denso

- Desechable



No. Pieza	L x A pulg.	cm	MdU
HS120116	3 x 3	7.6 x 7.6	500 cu/pqt., 12 pqt./caja
HS120117	4 x 4	10.2 x 10.2	
HS120118	6 x 6	15.2 x 15.2	



smartBoat™

Una solución verdaderamente ecológica para el pesaje de muestras

Fabricado de papel FSC® Certificado (FSC® Crédito Mixto) (Eco-IN) y cuando se descarta en la corriente de desechos estándar se biodegradan naturalmente (Eco-OUT).

- Una solución costo-efectiva para reducir plásticos en el laboratorio
- Fabricado de papel a prueba de grasa que cumple con FDA 21 CFR 176.170 (componentes de papel en contacto con alimentos acuosos y grasos) y con 21 CFR 176.180 (contacto con alimentos secos)
- Controle el contenido igual a una navetilla de pesaje de poliestireno porque son más fácil de verter
- Una alternativa al papel de pesaje estándar porque son más fáciles de manejar

No. Pieza	Color	Medida	L x A x A pulg.	mm	MdU
HS120312	Café	Pequeño	13.8 x 13.8 x 5.9	35 x 35 x 15	500 cu/pqt., 10 pqt./caja
HS120314	Blanco				
HS120313	Café	Mediano	17.7 x 17.7 x 5.9	45 x 45 x 15	500 cu/pqt., 10 pqt./caja
HS120315	Blanco				
120626	Café	Grande	3.2 x 3.2 x 1	95 x 95 x 25	250 cu/pqt., 8 pqt./caja
HS120195	Blanco				

smartBoat™ es una marca registrada de LevGo Inc

Funcional en el laboratorio


Disponible en pequeño y mediano ambos en café para muestras de color claro y blanco para muestras oscuras.



smartSpatula®

Diseñadas para un ajustarse perfectamente a tubos estándar de 0.2, 0.5, 1.5/2.0, 15 y 50 mL

- Fabricados de polipropileno virgen, grado alimenticio
- Ideal para dosificar y recogimiento de muestras en polvos o sólidos blandos
- No se estropea al utilizarse con muestra congeladas de líquido nitrógeno
- El núcleo hueco minimiza la transferencia de calor, bueno para líquidos fríos y calientes
- Versiones antiestáticas, estériles, y ecológicas disponibles
- Cumple con las normas estándar de la FDA para contacto con alimentos
- Desechable
- Autoclavable

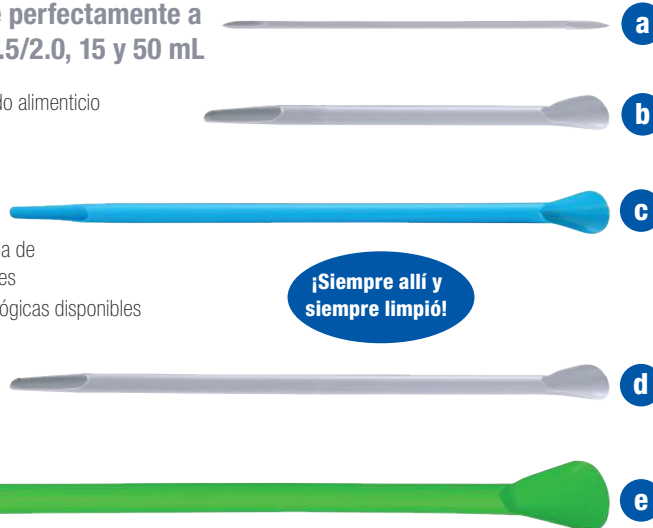

¡Siempre allí y siempre limpió!

Artículos de laboratorio que cucharan, revuelven, y raspan.



No. Pieza	Descripción	Color	Tubo Sugerido mL	L x A pulg.	cm	Cuchara (ensanchada) pulg.	mm	Cucharón/Piqueta pulg.	mm	L x A Afilar	MdU
a HS120005	Micro-Atiestático	Opaco	0.2 y 0.5	5.5 x .2	14 x .4	—	—	4.3	11 (punta-V)	15°	300 cu/pqt., 25 pqt./caja
b HS120008	Ecológico	Opaco	15 y 1.5	5.5 x .3	14 x .7	9.8 x 5.5	25 x 14	11.8 x 1.2	30 x 3		300 cu/pqt., 24 pqt./caja
c HS120003	Estándar	Azul									300 cu/pqt., 25 pqt./caja
HS120004	Estándar	Opaco									300 cu/pqt., 25 pqt./caja
d HS120007	Est. EtO Estérile	Opaco	15 y 1.5	8.3 x .3	21 x .7	9.8 x 5.5	25 x 14	11.8 x 1.2	30 x 3		100 cu/pqt., 5 pqt./caja
120625	Est. EtO Estérile	Opaco									100 cu/pqt., 5 pqt./caja
e HS120006	Macro	Verde	50	12.2 x .4	31 x 1	16.5 x 9.3	42 x 23.5	11.8	30	35°	150 cu/pqt., 24 pqt./caja

*No-Toxico/No-Pirogénica

smartSpatula® es una marca registrada de LevGo Inc.



Espátulas

Transfiere, levante, y maneje polvos y materiales granulares

- Hecho de alambre de acero inoxidable niquelado
- Espátula glaseada HS15906 tiene un extremo tipo Hayman
- Autoclavable

No. Pieza	Tipo de Punta	Punta L x A		Largo Total		Acabado	MdU
		pulg.	mm	pulg.	cm		
HS15906	Plano	1.2	30	6	15	Glaseado	1 ea, 200 cu/caja
	Cuchara	0.5 x 0.2	12 x 4				
HS15907	Plano Redondo	2 x 0.3	50 x 8	7.7	19.5	Reflejo	1 ea, 200 cu/caja
	Plano Afilado	1.8 x 0.3	45 x 6.5				
HS15909	Plano	2	50	8.9	22.5	Reflejo	1 ea, 200 cu/caja
	Cuchara	1.5 x 0.6	38 x 15				

Navecilla de Pesaje Estéril y Cucharon de Doble Propósito

- Productos esterilizados con haz electrones son idealmente adecuado para aplicaciones biológicamente sensibles
- Los requisitos de dosificación para la esterilización de haz de electrones que resultan en productos esterilizados se determinan por procedimientos que cumplen con la norma ISO 111373:2017
- Fabricado de 100% poliestireno antiestático que es impermeable y reduce la posibilidad de que materiales se peguen al cucharón
- Desechable
- Paquete fácil de romper facilita manejo rápido
- Trazabilidad de número de lote para control de calidad

smartSpatula® Estéril

- 100% polipropileno de grado alimenticio (cumple con las normas de la FDA para aplicaciones de contacto con alimentos)
- Esterilizado usando Esterilización de Oxido Etileno (EO), con Límites Residuales de EO por ISO 109937: EO<4mg/dispositivo, ECH <9 mg/dispositivo
- Espátulas modelo 120625 límites de Endotoxina son de acuerdo a los requisitos USP 85: <0.5IU/ml o 20 IU/dispositivo/ NoPirógena
- Diseño doblepunta cuchara y cucharon
- Resistente a ácidos y bases diluidos
- Resistente a roturas en líquido nitrógeno
- Cuchara se ajusta a tubos de 15 mL
- Cucharon se ajusta a tubos de 0.5 mL
- Autoclavable
- LevGo Patente EU 8709632



Navecilla de Pesaje Estéril

No. Pieza	Color	Medida	Volumen mL	L x A x A pulg.	cm	MdU
120710	Blanco	☐ Mediano	85	3.4 x 3.4 x .9	8.5 x 8.5 x 2.4	5 cu/bolsa, 200 cu/pqt.

Cucharones Estéril

No. Pieza	Color	Medida	L x A pulg.	cm	MdU
120679	Negro	☒ Grande	5 x 3.5	12.7 x 9	10 cu/bolsa, 100 cu/pqt.
120680	Negro	☒ Pequeño	5 x 2.5	12.7 x 6.3	10 cu/bolsa, 100 cu/pqt.

smartSpatula®

No. Pieza	Color	L x A pulg.	cm	Cuchara (ensanchada)		Cucharon/Piqueta	L x A pulg.	cm	MdU
HS120007	Opaco	☐	8.3 x .3	21 x .7	9.8 x 5.5	2.5 x 1.4	11.8 x 1.2	3 x 0.3	100 cu/pqt.
120625*	Opaco	☐							100 cu/pqt.

*No-Toxico/No-Pirógena

smartSpatula® es una marca registrada de LevGo Inc.



Heathrow Scientific, LLC | 620 Lakeview Parkway, Vernon Hills IL 60061 USA
Tel.: +1-847-816-5070 | Fax: +1-847-816-5072 | E-mail: info@heatsci.com | www.heathrowscientific.com