

-86 °C Ultra Low Temperature Freezer MDF-86V408E




File box



Ergonomic handle

Easy open
Lock&keys

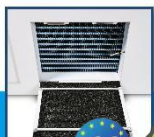

Quick-release filter



7" touch screen

All information display

Air pressure balance valve



USB interface



Heavy duty castors



METHER ULT freezers are made of color sprayed anti-bacterial and anti-corrosion cold-rolled steel. Various configurations and humanized designs bring great convenience to users.

Access port



Remote interface
RS232/485

Power on/off



Características Generales:

1. El sistema, el modelo MDF-86V408E es un sistema dual, es decir, si un compresor falla, el izquierdo podría seguir funcionando para mantener la temperatura interna a -80°C , lo que significa que tendría doble garantía de seguridad para proteger el almacenamiento en su interior.
2. El modelo MDF-86V408E debido a que incluye 2 compresores tienen 2 sistemas de enfriamiento independientes.
3. El modelo MDF-86V408E tienen un controlador de pantalla táctil de 7 pulgadas, que permite mostrar la tabla de datos del historial y los registros de alarma, los tiempos de apertura de la puerta, la información de temperatura (temperatura interna del gabinete, la temperatura ambiente, la temperatura del condensador, la temperatura del compresor) en la pantalla. En consecuencia, resulta muy fácil comprobar el estatus de la condición de funcionamiento del congelador.
4. Utiliza compresores SCORP modelo SC21CNX.2, de fabricación alemana (los mismos que usa Haier)



5. Certificado de garantía de 2 años para todo el sistema.
6. Recomendamos una UPS que normalmente coincida con la potencia del compresor, que es de 890W, y corriente 5.34A, 220V 50HZ..

Opcionales



LN₂/CO₂ backup system



Data logger



Chart recorder



Racks & Boxes